

Silmatilgad, lahus, säilitusainevaba

1. Mis on OCUflash blue ja milleks seda kasutatakse

OCUflash blue on silmarohu (*Euphrasia officinalis*) ekstrakti sisaldav säilitusainevaba silmatilkade lahus.

Silmatilgad on mõeldud silma tilgutamiseks, silmade loputamiseks või silmakompressiks. *Euphrasia officinalis* ekstrakt ehk silmarohu ekstrakt toimib silmas põletikuvastase, desinfitseeriva ja kootava vahendina. Nimetatud omaduste tõttu kasutatakse silmarohuekstrakti juba pikka aega silmade rahustamiseks, mittenakkusliku lau- ja sidekestapõletiku profülaktikaks ja täiendavaks raviks.

OCUflash blue kasutatakse silmapesulahusena, silmast ärritavate osakeste välja loputamiseks ja silmade ebamugavustunde leevendamiseks, näiteks põletustunne, lõikav valu, sügelus ja võõrkehahanne silmas.

OCUflash blue ei sisalda säilitusaineid ja on seega ideaalne toode kontaktläätsede kandjatele ja tundlike silmadega inimesele.

Praktikas sobib OCUflash blue kasutamiseks järgmistel juhtudel:

- silmade loputamiseks pärast tonomeetriat või gonioskoopiat
- silma loputamiseks sellest võõrkeha, tolmu ja kloorivee eemaldamiseks
- fluorestseiniilahuse jääkide eemaldamiseks
- limase või mädase sekreedi eemaldamiseks
- silmade pesemiseks pärast kontaktläätsede kandmist
- ideaalne esmaabivahend pärast kerget sidekesta ja silma erosiooni happelise või leeliselise toime tagajärjel (lubivärv, mört)
- toetava ravina konjunktiviidi korral
- sobiva vahendina meigi eemaldamiseks silmapiirkonnast (laugudelt ja ripsmetelt)

OCUflash blue võivad kasutada täiskasvanud, noorukid, lapsed. Tänu preparaadi ohutusele võib seda kasutada vastsündinutel ja imikutel, samuti võivad OCUflash®-i tarvitada rasedad ja rinnaga toitvad emad.

2. Mida peab teadma enne OCUflash blue kasutamist

OCUflash blue ei tohi kasutada, kui esineb allergia mõne koostisaine suhtes. Kui tarvitate samal ajal ka mingeid muid silmatilku, on soovitatav kahe manustamise vahe 5 minutit.

3. Kuidas kasutada OCUflash blue

Silmade rahustamiseks ning konjunktivi ja silmalaua mittenakkusliku põletiku toetavaks raviks on soovitatav annus 1-2 tilka 1-4 korda päevas.


Silmade pesemisel kantakse lahus kuni saasteaine või võõrkeha eemaldamiseni. OCUflash blue võib kasutada pikaajaliselt.

Kontaktläätsede kandjad

OCUflash blue võib kasutada kontaktläätsede kandmise ajal.

Ettevaatusabinõud enne kasutamist


1. Peske käed ja istuge või seiske mugavalt.
2. Keerake pudeli kork lahti

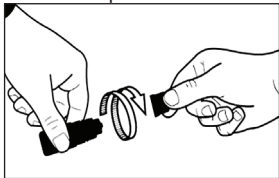

3. Hoidke pudelit pöidla ja teiste sõrmede vahel suunaga alla.
4. Enne esimest kasutuskorda on soovituslik pigistada esimene tilk mujale kui silma, õrnalt pudelit pigistades, sest tugeva ja ebakorrapärase pigistamise korral võib lahus tulla välja suures koguses.
5. Kasutage sõrme, et tõmmata silma alumine laug õrnalt alla.



- Asetage tilguti ots silma lähedale, kuid nii, et see ei puudutaks silma ega silmaga külgnevaid piirkondi.
- Pigistage pudelit õrnalt, nii et ainult 1 tilk läheb silma või rohkem tilku, kui on vaja silma loputada. Seejärel laske alumine laug lahti ja sulgege aeglaselt silm nii, et *OCUflash blue* jaotub ühtlaselt silma pinnale. Järgmise tilga väljutamiseks laske õhk plastpudelis tagasi, et saavutada pudeli algne kuju, seejärel jätkake vastavalt soovitusel lahuse silma tilgutamist. Pange tähele, et pigistamise ja tilga langemise vahel võib jääda mõni sekund. Pudelit ei tohi liiga kõvasti pigistada.

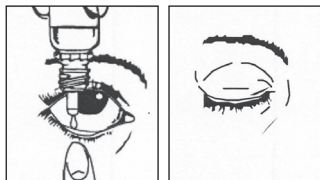

- Kui vaja, korrake protseduuri teise silmaga.



- Pärast kasutamist on vajalik pudelit üks kord alla poole raputada, ilma tilguti otsa puutumata, et eemaldada igasugune lahuse jääk otsikult. See on vajalik silmatilkade steriilsuse tagamiseks ja järgmise tilga kergemini väljutamiseks järgmisel kasutuskorral.
- Kohe pärast kasutamist sulgege pudelikork tihedalt.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Harva võib vahetult pärast lahuse kasutamist tekkida ajutiselt kerge põletustunne või esineda allergiline reaktsioon mõne koostisaine suhtes.

Kui ilmneb mõni neist sümptomitest või muud ebaharilikud reaktsioonid, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

5. Mida *OCUflash blue* sisaldab

Naatriumkloriid 7 mg 1 ml kohta, dinaatriumedetaatdihüdraat, kaaliumkloriid, magneesiumkloriid-heksahüdraat, polüsorbaat 80, silmarohuekstrakt, naatriumboraat, naatriumhüdrosiid, puhastatud vesi.

6. Kuidas säilitada *OCUflash blue* ja muu informatsioon

Säilitage toodet originaalpakendis temperatuuril 25 °C. Mitte hoida külmkapis ega külmutada.

Hoida lastele kättesaamatult ja nägemispiirkonnast eemal.

Ärge kasutage toodet pärast kehtivusaja lõppemist, mis on märgitud ümbri-
se sildil või kartongpakendil liivakella kujutise kõrval. Aegumiskuupäev viitab viimasele päevale antud kuul.

Kasutage *OCUflash blue* 3 kuu jooksul pärast esmast avamist.

Pakendi suurus: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Bratislava, Slovaki Vabariik

Tel: +421 2 4333 3786

Faks: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



Teksti viimase läbivaatamise kuupäev: aprill 2020.